

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  
(МФТИ)

КАФЕДРА ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО ВАКУУМА

Работу выполнили студенты \_\_\_\_\_ П.Ю. Шлыков

группы Б04-004 \_\_\_\_\_ М.В. Шлапак

\_\_\_\_\_ Н.А. Плюскова

Работу принял, оценка \_\_\_\_\_

Долгопрудный 2021

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Лабораторная установка . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Выполнение работы . . . . .</b>	<b>3</b>
3.1	Подготовка к экспериментам . . . . .	3
3.2	Эксперимент 1. Откачка вакуумной системы с помощью форвакуумного насоса. . . . .	3
3.3	Эксперимент 2. Откачка вакуумной системы с газовой нагрузкой. . . . .	4
3.4	Эксперимент 3. Высоковакуумная откачка. . . . .	4
<b>4</b>	<b>Вывод . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Список использованной литературы . . . . .</b>	<b>8</b>

# 1 Цель работы

1. Ознакомиться с принципом работы форвакуумного насоса.
2. Ознакомиться с методами вакуумных расчётов, найти зависимость величины газового потока в системе от давления.
3. Определить производительность турбомолекулярного насоса.
4. Рассчитать объем рабочей камеры.

## 2 Лабораторная установка

Лабораторная установка предназначена для ознакомления с основными приборами вакуумной техники: насосами, манометрами, измерителями расхода газа. Схема установки представлена на рисунке 1.

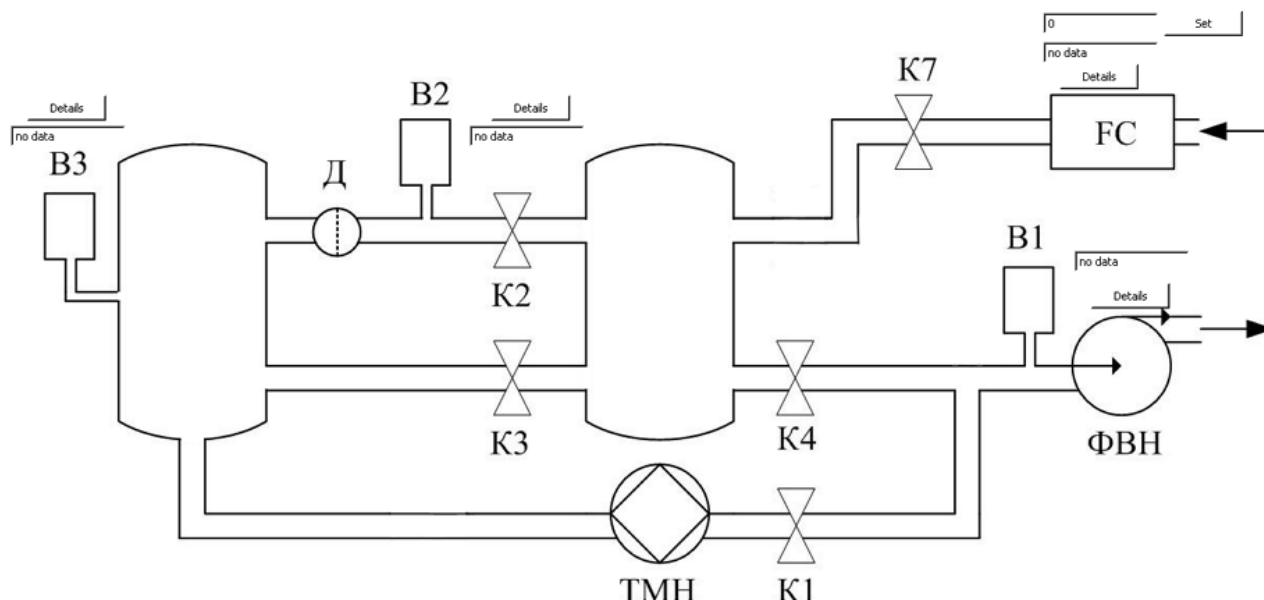


Рис. 1: Схема лабораторной установки

На схеме обозначены:

- $B_1$  - вакуумметр ёмкостной
- $B_2$  - вакуумметр терморезисторный
- $B_3$  - вакуумметр ионизационный
- $K_1$  - кран турбомолекулярного насоса
- $K_3$  - высоковакуумная заслонка
- $K_4$  - форвакуумная заслонка
- $K_2, K_7$  - коммутационные краны
- Д - диафрагма
- FC - регулятор газового потока (flow controller)

ТМН - турбомолекулярный насос

ФВН - форвакуумный насос

## 3 Выполнение работы

### 3.1 Подготовка к экспериментам

1. Включаем компьютер, монитор, контроллер, загружаем операционную систему.
2. Открываем все клапаны в вакуумной системе - К2, К3, К4, К7.
3. Полностью откручиваем, снимаем и затем закручиваем на место до полного уплотнения клапан напуска атмосферы и убеждаемся, что в систему напущен воздух.
4. Создаем все необходимые для сохранения графиков папки на компьютере.
5. Запускаем C:\vacuum\SCADA\_client.exe.
6. Включаем в программе вакууметры В1 и В2, регулятор расхода газа FC.
7. делаем запись в лабораторном журнале, чтобы впоследствии синхронизировать начало отсчёта для всех графиков.

**Начальное состояние системы:** все клапаны открыты, давление внутри системы - атмосферное. 16:23 - включены вакууметры В1, В2 и регулятор расхода газа FC.

### 3.2 Эксперимент 1. Откачка вакуумной системы с помощью форвакуумного насоса.

**16:23 - время включения форвакуумного насоса**

В течение 10 минут давление в  $10^{-2}$  Торр достигнуто не было, из чего можно сделать вывод, что установка чисто физически не может откачать до такого давления.

**16:34 - прекращение эксперимента**

### 3.3 Эксперимент 2. Откачка вакуумной системы с газовой нагрузкой.

При давлении примерно 0.02 Торр получили  $\Delta Q \approx 2.2 sccm$ , что по нашей оценке равно натеканию газа на нашей установке. Можно предположить, что датчик на регуляторе потока показывает значение потока сразу с учётом натекания.

$$Q_{leak} + Q_{FC} = Q$$

Поток воздуха

$$Q - P * S(P) = \frac{d(PV)}{dt}$$

При  $P = const$

$$\frac{d(PV)}{dt} = 0$$

Тогда

$$S(P) = \frac{Q}{P}$$

По этой формуле рассчитаем значения  $S(P)$  и занесём результаты в таблицу 1. Построим график зависимости  $Q$  от  $P$  (рисунок 5), тогда по формуле среднее значение  $S$  будет равно угловому коэффициенту получившейся прямой, переведённой в  $m^3/h$ .

$$S = 95.242 sccm = 4.33 m^3/h$$

Но рассчитанные значения не совпадают с этой аппроксимацией. Значит, имеется другой характер зависимости. Быстродействие насоса также зависит от давления в установке.

$$\begin{aligned} Q &= \frac{d(PV)}{dt} \\ S(P) &= \frac{Q}{P} = -V \frac{d(\ln P)}{dt} \\ P(t) &= P_0 + P(0) * \exp\left(\frac{S_0}{V} * t\right) \\ S(P) &= S_0 \left(1 - \frac{P_0}{P}\right) \end{aligned}$$

По значениям из таблицы 1 построим график зависимости быстродействия от давления в установке (рисунок 6). Экстраполируем его под полученную зависимость:  $S_0 = 3.65 m^3/h$ ,  $P_0 = 0.02 torr$ . Полученное значение на 16% отличается от экстраполированного по прямой.

### 3.4 Эксперимент 3. Высоковакуумная откачка.

1. Закроем КЗ, включаем турбомолекулярный насос.

**16:51 - время включения турбомолекулярного насоса**

2. Убеждаемся, что турбомолекулярный насос вышел на рабочий режим 42000 об/мин. (зелёный диод горит непрерывно).

3. Включаем вакуумметр ВЗ.

**16:53 - время включения вакуумметра ВЗ**

4. Дожидаемся резкого излома на графике показаний вакуумметра ВЗ.

**17:01 - появление резкого излома на графике показаний вакуумметра ВЗ**

5. Поднимаем давление в форвакуумной части системы до давления примерно 1 Торр по схеме:

(a) устанавливаем поток 5 сссм

(b) ждем 10 секунд

(c) устанавливаем поток 10 сссм

(d) ждем 10 секунд

(e) устанавливаем поток 15 сссм

(f) ждем 10 секунд

(g) устанавливаем поток 20 сссм

(h) ждем 10 секунд

(i) устанавливаем поток 25 сссм

(j) ждем 10 секунд

(k) устанавливаем поток 30 сссм

(l) ждем 10 секунд

(m) устанавливаем поток 35 сссм

(n) ждем 10 секунд

(o) устанавливаем поток 40 сссм

(p) ждем 10 секунд

6. Закрываем клапан К2.

7. Отключаем подачу газа в систему.

**17:03 - время закрытия К2. Установлен поток газа, равный нулю.**

8. Определим, можно ли считать течение газа через диафрагму молекулярным. Для этого оценим длину свободного пробега молекул:

$$\lambda = \frac{kT}{\sigma P} \approx 1.22m$$

где  $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К – постоянная Больцмана

$T \approx 293$  К – комнатная температура

$\sigma = 62,5 \cdot 10^{-20} m^2$  – среднее эффективное сечение рассеяния для воздуха

$P \approx 4 \cdot 10^{-5}$  Торр =  $4 \cdot 133 \cdot 10^{-5}$  Па – порядок давления в высоковакуумной части системы

Диаметр отверстия диафрагмы равен  $d = 100$  мкм. Видно, что  $d \ll \lambda$ , поэтому течение газа через диафрагму можно считать молекулярным. Следовательно, справедлива формула нахождения молекулярного потока через диафрагму (отверстие):

$$Q = S \sqrt{\frac{RT}{2\pi\mu}} (P_2 - P_3)$$

где  $P_2, P_3$  - давления на В2 и В3 соответственно

$S = \frac{\pi d^2}{4}$  - площадь отверстия в диафрагме

$\mu$  - молярная масса воздуха

Так как  $P_3$

$\ll P_2$ , формула примет вид

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{RT}{2\pi\mu}} P_2$$

#### 9. Рассмотрим модель потока через турбомолекулярный насос

$$P_3 S(P_3) = Q - \frac{d(P_2 V)}{dt}$$

$$Q \gg \frac{d(P_2 V)}{dt}$$

Получим:

$$P_3 S(P_3) = Q = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{RT}{2\pi\mu}} P_2$$

10. Построим по полученным данным график зависимости давления от времени в высоковакуумной части при включенном турбомолекулярном насосе, а также график зависимости производительности турбомолекулярного насоса от впускного давления. Расчитаем поток через диафрагму (график зависимости потока от времени).
11. Сравним это значение с данными производителя: график зависимости производительности от давления при разных газах представлен на рисунке 10

По документации производительность ТМН, перекачивающего азот (основная часть атмосферы), равна 30 л/с при давлениях порядка  $10^{-5}$  Торр и практически постоянна. Турбомолекулярный насос в нашем эксперименте быстро вышел на свои предельные значения при  $10^{-5}$  Торр и рассчитанная производительность практически совпадает с данными производителя.

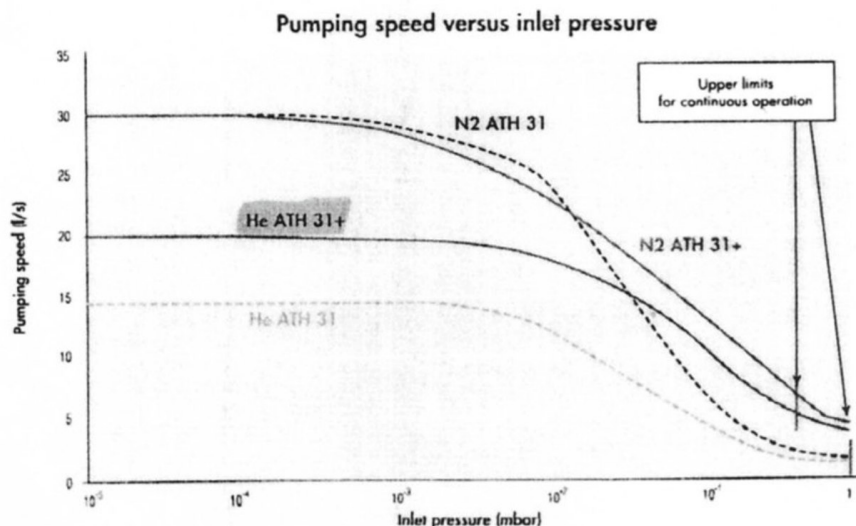


Рис. 2: Данные производителя о зависимости производительности тМН от давления

12. Для определения объёма рабочей камеры необходимо создать условия отсутствия натекания газа через диафрагму. В нашем эксперименте таких условия предоставлено не было, следовательно, нельзя с большой точность определить объём рабочей камеры

## 4 Вывод

В ходе работы мы ознакомились с принципами работы вакуумной техники, определили характеристики насосов и вакуумметров, изучили методы получения и измерения вакуума.

1. Определены рабочие диапазоны вакуумметров:

- ёмкостной: 760 – 1 Торр
- терморезисторный:  $10 - 10^{-3}$  Торр
- ионизационный:  $10^{-3} - 10^{-5}$  Торр

2. На установке получен высокий вакуум порядка  $10^{-5}$  Торр

3. Определены быстродействия вакуумных насосов:

- форвакуумный:  $3.65 m^3/h$
- турбомолекулярный  $26.1 m^3/h$ :



## 5 Список использованной литературы

1. Методы получения высокого вакуума: лабораторная работа по курсу Вакуумная электроника / сост.: А.С. Батулин, И.Н. Ескин, Д.А. Свинцов, П.А. Стариков, Е.П. Шешин – М.: МФТИ, 2010. – 36 с.
2. Шешин Е.П. — Основы вакуумной электроники: учеб. пособие. – 2-е издание, испр. И доп. - М.: МФТИ, 2009. - 149 с.
3. Шешин Е.П. — Вакуумные технологии: учеб. пособие. / Долгопрудный: издательский Дом «Интеллект», 2009. - 504 с.